FastGene CapEasy | NIPPON Genetics

Praktický otevírač/uzavírač PCR mikrozkumavek v proužku

- Umožňuje otevírání a uzavírání PCR mikrozkumavek ve stripu o velikosti 8 či 12 a objemu 0,1 ml i 0,2 ml (nelze využít pro samostatné PCR mikrozkumavky)
- Eliminuje riziko rozbití víčka a rozlití či cross-kontaminace vzorků
- Vhodný pro vyklenutá i plochá víčka mikrozkumavek
- Možnost sterilizace v autoklávu




FastGene CapEasy | NIPPON Genetics



Pro uzavření stripu vložte mikrozkumavky do jamek, uzavřete víko FastGene CapEasy a rovnoměrně na něj zatlačte



Pro otevření stripu vložte mikrozkumavky do jamek, umístěte hřebínek do drážek FastGene CapEasy a posuňte jej vpřed tak, aby se dotýkal mikrozkumavek

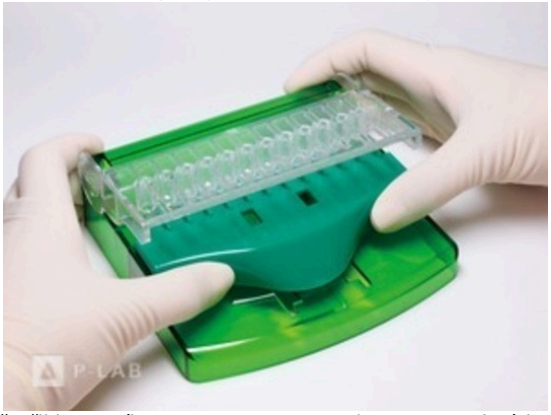

Jemně přiklopte víko FastGene CapEasy (pro prevenci pádu víčka stripu), zároveň přidržte CapEasy a pomocí palců posunujte hřebínek směrem k mikrozkumavkám, dokud neuslyšíte kliknutí



Proužek mikrozkumavek je nyní otevřen a je možné otevřít i víko
FastGene CapEasy

Popis	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
FastGene CapEasy	červená	1	N034302

Hřebínek pro otevírání mikrozkumavek je součástí balení.